

GENERATORE DI IDROGENO HORIBA OPGU-3200



Caratteristiche principali

I generatori di Idrogeno della serie OPGU-3000 utilizzano una cella elettrolitica funzionante solamente con acqua distillata e demineralizzata. Grazie all'impiego di elettrolita solido (S. P. E.) non è necessario alcun altro composto (es. soda) per attivare la reazione elettrolitica in grado di generare Idrogeno puro al 99,999%.




SERVIZI
TECNOLOGICI
AMBIENTALI

HORIBA
Process & Environmental


Caratteristiche tecniche

Purezza del gas	Maggiore del 99,999%
Massimo flusso generato	225 ml/min
Pressione massima	20 ÷ 40 Kpa
Capacità del serbatoio	2 Litri
Acqua da impiegare	Ultrapura con conducibilità inferiore 0,2µS/cm
Consumo di acqua	12 ml/ora
Temperatura di funzionamento	5 ÷ 40° C
Alimentazione	100 ÷ 220 V 50 Hz
Peso	11 Kg
Conformità	Tutte le normative in materia di sicurezza europee
Applicazioni	Generatori di FUEL gas per gascromatografia Generatori di FUEL gas per analizzatori di THC Applicazioni da laboratorio dove è necessario una continua e sicura sorgente di Idrogeno

Dimensioni (mm)

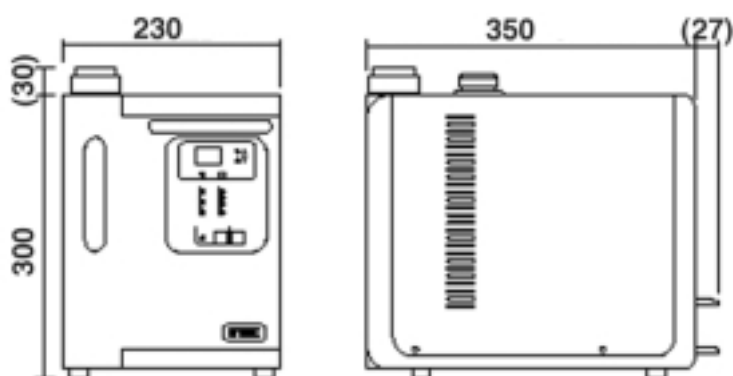

Schema di flusso

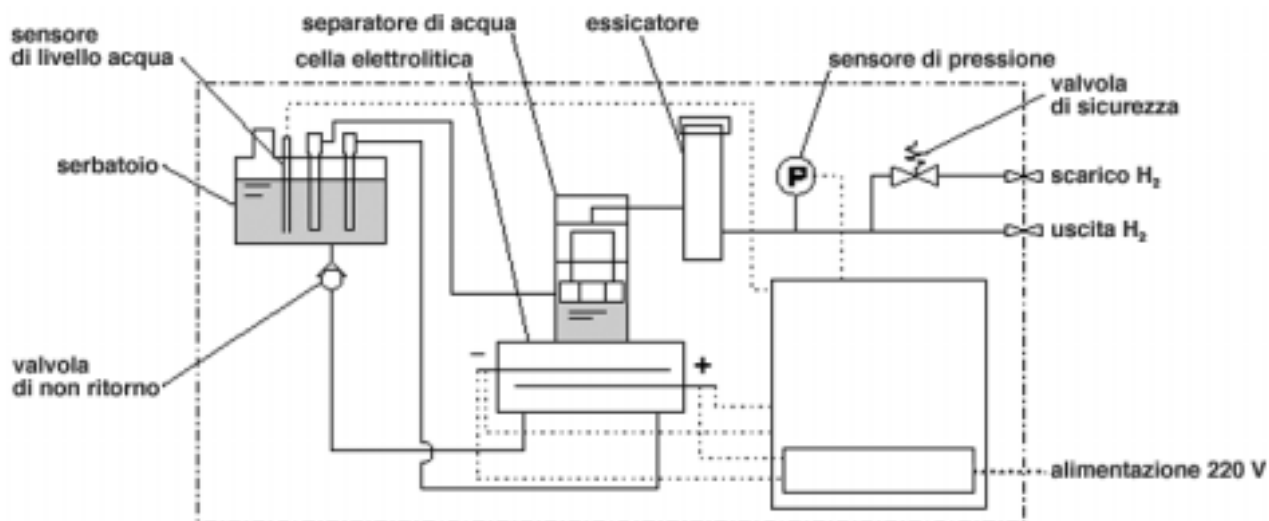

STA s.r.l.

Uffici e laboratori

Via Edison, 15/17 - Località Serinda - 20018 Sedriano (MI)

Tel. +39 02 90260913 - Fax +39 02 90111688

E-mail: sta@sta-srl.it - www.sta-srl.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =